



# EASY WAY COIL™ System

Compliance-freies und effektive Eingliederung verlagertes und/oder retinierter Zähne



## PERFORMANCE

Das EASY WAY COIL™ System arbeitet mit konstanten Kräften während der Therapie verlagertes Zähne. Es kann sowohl unilateral als auch bilateral eingesetzt werden, bietet zuverlässige Verankerung und arbeitet ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

## POWER

Eine Vielzahl an Behandlungsoptionen sind möglich, wie die Therapie von extrem verlagerten Zähnen mithilfe von Zugkraft in disto-inzisaler Richtung, von palatinal verlagerten Zähnen bei disto-bukkaler Zugrichtung, der gleichzeitigen Eingliederung mehrerer Verlagerungen bei Einsatz temporärer Verankerungsapparaturen (TADs), oder dem frühzeitigen Management verlagertes oberer Schneidezähne bei skelettaler Verankerung.

## SPEED

Das EASY WAY COIL™ System wird in 1-2 mm-Schritten in vierwöchigen Intervallen aktiviert. Die aktive Feder hält das Kraftniveau während des jeweiligen Aktivierungsintervalls konstant aufrecht und gewährleistet somit eine effiziente und gesunde Zahnbewegung ohne Patientenmitwirkung.


## EXTRA-VORTEIL

Im Gegensatz zu Federn aus anderen Materialien (z. B. Nickeltitan), ist unsere präzise geformte, eng gewickelte Edelstahl-Feder so stabil, dass während der Behandlung kein unerwünschter Torque generiert wird. Darüber hinaus verhindert der Feder-Clip unerwünschte Rotationsbewegungen – die Behandlung wird verkürzt, da unnötige Rotationskorrekturen im Nachhinein nicht nötig sind.



## LOVE STORY

Das EASY WAY COIL™ System ist eine hocheffektive Apparatur, deren Herzstück eine Edelstahl-Feder ist. Diese gewährleistet eine extrem lange Aktivierungsstrecke, bietet verschiedene Krafrichtungen sowie eine einfache Re-Aktivierung. Eine klinisch bewährte Technik für die effektive Einordnung verlagertes Schneidezähne, Eckzähne und Prämolaren.

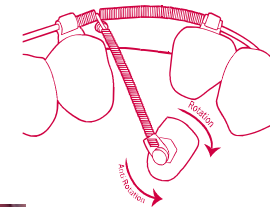

einfach in der Anwendung



schnell umsetzbar



klinisch zuverlässig



planbar



Spezialfeder mit 90° für horizontal verlagerte Zähne



By courtesy of Dr. Michael Schubert, Regensburg

EASY WAY COIL™ SYSTEM	
STANDARD 1 Patientenset: 1 aktive Feder+ 1 passive Platzhaltefeder	EWCS1
STANDARD 5 Patientenset: 5 aktive Feder + 5 passive Platzhaltefeder	EWCS5
90° SPECIAL 1 Patientenset: 1 aktive Feder + 1 passive Platzhaltefeder	EWCS1-90
90° SPECIAL 5 Patientenset: 5 aktive Feder + 5 passive Platzhaltefeder	EWCS5-90

Einzelset  
EUR / Set

5er Set  
EUR / Set

