




DISTAL GLIDE™

Effektive Distalisation

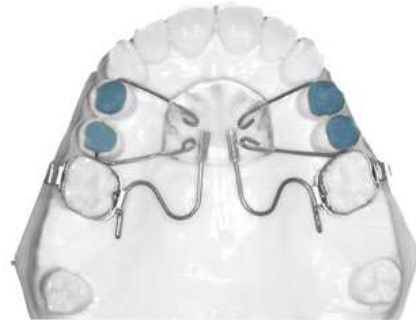

LOVE STORY

Adenta® hat diese Apparatur entwickelt, um eine erhöhte Stabilität sowie eine verbesserte Gewebe- und Knochenreaktion bieten zu können. Die Distalisationsfedern werden aus einer hochwertigen, nickelfreien Beta-Titanium-Legierung gefertigt, wodurch eine ideale Kombination aus Elastizität und Distalisationskraft gegeben ist.



PERFORMANCE

Der DISTAL GLIDE™ verfügt über Federn, die präzise aus einer hochwertigen, nickelfreien Beta-Titanium-Legierung gefertigt werden. Neben einer erhöhten Stabilität ermöglichen diese eine verbesserte Gewebe- und Knochenreaktion.



POWER

Unsere .032^{er} nickelfreien Beta-Titanium-Federn bieten im Vergleich zu Edelstahl ein doppelt elastisches Moment bei gleichzeitig guter Formbarkeit. Die Beta-Titanium-Federn von Adenta® können Korrekturbiegungen von 90° bis zu dreimal gewährleisten – über Anpassungsbiegungen braucht man sich daher keine Sorgen mehr zu machen.



SPEED

Die Aktivierung der Apparatur erfolgt außerhalb des Mundes, indem einfach eine neue Feder genommen und diese so abgeschnitten wird, dass sie 4 mm länger als die vorher zum Einsatz gekommene Feder ist.



EXTRA-VORTEIL

Vorgefertigte, horizontal flache Federn minimieren Fehler beim Biegen und gewährleisten gleichmäßige Kräfte.



Die Aktivierung der Distalisationsapparatur ist absolut einfach durch Abschneiden einer neuen DISTAL GLIDE™-Feder realisierbar. Diese sollte dann um 4 mm länger als die vorherige Feder sein.

DISTAL GLIDE™	
Profi Kit 10 x Feder rechts, 10 x Feder links 20 x Goshgariantubes	DP-DGP-PR
Starter Kit 5 x Feder rechts, 5 x Feder links 10 x Goshgariantubes	DP-DGP-ST

PROFI KIT
EUR

STARTER KIT
EUR

